

Seit 1979 helfen wir Familien die Freude eines trockenen Nachtschlafs wieder zu entdecken.



*Erfolgreiche Behandlung von  
nächtlichem Einnässen seit 1979*

*Mit einem Lächeln  
aufwachen*



**Nächtliches Einnässen beenden  
mit unseren weltweit führenden  
Bettnässer Therapiesystemen**



REV2018-12-001

Vertrieb durch:

KREIENBAUM Neoscience GmbH

Heinrich-von-Stephan-Str. 9 · 40764 Langenfeld

info@krienbaum-neo.de

Tel. +49 (0) 2173 39927 0 · Fax +49 (0) 2173 39927-23

[www.krienbaum-neo.de](http://www.krienbaum-neo.de)



BDSINT Updated 12/06/2014

Hergestellt von:

Anzacare Ltd

PO Box 400

Waikanae 5250

Neuseeland

[www.dri-sleeper.com](http://www.dri-sleeper.com)

[www.dri-sleeper.com](http://www.dri-sleeper.com)

# Mit dem **DRI Sleeper®** gehört nächtliches Einnässen der Vergangenheit an! Schnell!

## DRI Sleeper® eclipse


### ► DRI Sleeper® eclipse Mit kabellosem UROSENSOR™



Der DRI Sleeper® eclipse ist sehr einfach zu bedienen. Einfach den Urosensor™ in die Unterwäsche einlegen (am besten im Inneren einer Slip Einlage) oder zwischen zwei fest sitzenden Unterhosen oder in einer Windel. Platzieren Sie die Alarmbox auf einem Tisch und schalten Sie diese ein. Die Behandlung kann nun gestartet werden.

DRI Sleeper® eclipse Empfänger

Urosensor™

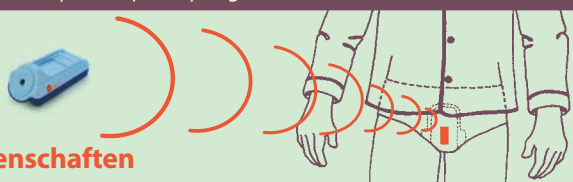

### Eigenschaften

- Patentierter Urosensor™ aus gegossenem Kunststoff, welcher einfach zu säubern und zu trocknen ist, für eine sofortige Wiederverwendung.
- Keine Metallkontakte die durch Urin korrodieren oder Hautirritationen verursachen können.
- Keine Kabel. Der Urosensor™ sendet direkt an die Alarmbox.
- Der Urosensor™ befindet sich direkt in der Unterwäsche, dies ist die beste Position um schnell das Austreten von Urin zu detektieren.
- Der Urosensor™ kann in (Nacht-)Windeln eingesetzt werden, so dass Ihr Kind diese weiter während des Trainings nutzen kann.
- Maximale Alarmierung mit Lautstärkeregelung.
- Der Urosensor™ hat eine langlebige Batterie mit spezieller Technologie um Batterie zu sparen.
- Der Urosensor™ kann den Alarm bis zu 12 m weit senden, so dass Eltern/Pflegekräfte die Alarmbox in Ihrem Schlafzimmer positionieren können.


## DRI Sleeper® excel

### ► DRI Sleeper® excel Mit eingebautem UROSENSOR™



### Vier einfache Schritte – fertig!

1. Platzieren Sie die Alarmeinheit auf die Schulterpartie des Schalfanzuges oder T-Shirts mit dem mitgelieferten Klettverschluss.
2. Legen Sie den Urosensor™ in die Unterwäsche ein (am besten im Inneren einer Slip Einlage) oder zwischen zwei fest sitzenden Unterhosen oder in einer Windel.
3. Führen Sie das Kabel unter dem Schalfanzug oder T-Shirt hoch bis zur Schulter.
4. Stecken Sie das Urosensor™ Kabel in die Alarmeinheit. Die Behandlung kann nun beginnen.

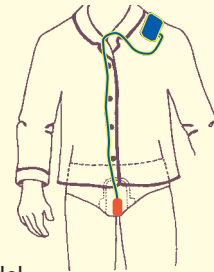

### Eigenschaften

- Patentierter, flexibler Urosensor™ aus gegossenem Kunststoff, welcher angenehm zu tragen ist. Einfach zu säubern und zu trocknen, für eine sofortige Wiederverwendung.
- Sensoren befinden sich auf beiden Seiten für ein schnelles Detektieren von Urin.
- Keine Metallkontakte die durch Urin korrodieren oder Hautirritationen verursachen können.
- Der Urosensor™ befindet sich direkt in der Unterwäsche, dies ist die beste Position um schnell das Austreten von Urin zu detektieren.
- Der Urosensor™ kann in (Nacht-)Windeln eingesetzt werden, so dass Ihr Kind diese weiter während des Trainings nutzen kann.
- Leichter Sensor für den Komfort Ihres Kindes.
- Maximale Alarmierung.

## Wie der DRI Sleeper® Eclipse und der DRI Sleeper® Excel funktionieren

- Der Urosensor™ wird in der Unterwäsche platziert und löst einen Alarm aus, wenn dieser durch Urin nass wird. Das Kind wird dadurch geweckt.
- In den nächsten Tagen und Wochen lernt das Kind schneller aufzuwachen bis es letztendlich aufwacht bevor das Einnässen beginnt und der Alarm ausgelöst wird.
- Das Kind wach jedes Mal wenn es auf die Toilette muss konsequent auf.
- Schließlich wird das Kind die Nacht durchschlafen ohne das Bett einzunässen oder die Toilette aufsuchen zu müssen.

Es wird einige Wochen bis zu einigen Monate dauern, aber wie Professor Hjalmas aus Schweden als führender Experte sagt: „Das ist die einzige Methode, die bewiesenermaßen das Problem behebt.“

**Internationale Untersuchungen bestätigen, dass ein Bettnässer Sensor die einzige bewiesene Methode ist um nächtliches Einnässen erfolgreich zu behandeln.**

### Die Fakten

Primäres Einnässen (auch als Enuresis nocturna bekannt) liegt vor, wenn Kinder nie die Kontrolle über Ihre Blase in der Nacht erreicht haben. Normalerweise ist dies das Ergebnis einer Entwicklungsverzögerung im normalen Blasenreflexsystem. Die Gene spielen eine Rolle – ein Kind wird mit 40%iger Wahrscheinlichkeit zum Bettnässer wenn ein Elternteil auch in jungen Jahren eingenässt hat und zu 70% bei beiden Elternteilen.

### Was zeigen Untersuchungen noch?

Wenn Ihr Kind noch nie nachts trocken war, dann ist die einzige Methode, welche bewiesenermaßen das Problem behebt, die des Bettnässer Alarms.

DRI Sleeper® Bettnässer Systeme haben Hundertausenden Kindern auf der ganzen Welt geholfen ihr Problem mit dem Bettnässen zu besiegen. Lassen Sie Ihr Kind sich anschließen.