

Vorbereitung

- 1 Nachdem der Patient intubiert wurde, wählen Sie die passende NeoBar®-Größe mit Hilfe des beiliegenden **NeoBar®-Messstreifens** aus.

Platzieren Sie die Mittellinie des Streifens am Nasenseptum. Die Farbe, die über dem Gehörgang liegt, entspricht der richtigen NeoBar®-Größe.

Hinweis: Wenn Sie zwischen zwei Größen unsicher sind, probieren Sie zuerst die kleinere Größe.

- 2 Um einen korrekten Sitz bei nasaler Intubation zu gewährleisten, positionieren Sie die NeoBar® **knapp oberhalb der Oberlippe** mit einem leichten Abwärtswinkel (a). Richten Sie die Plattform der Schiene auf das Nasenloch aus, aus dem der ET-Tubus austritt (b). Die Hydrokolloid-Pads müssen **direkt vor dem Ohr** platziert werden.

- 3 Reinigen und trocknen Sie die Haut an den Wangen gemäß den Vorgaben des Krankenhauses.

Hinweis: Es ist wichtig, dass die Haut so sauber und trocken wie möglich ist. Die Hydrokolloid-Klebe pads haften nicht richtig auf feuchter Haut oder Haaren. Öle und Lotionen beeinträchtigen die Haftung. **KEIN ALKOHOL VERWENDEN.**

Anwendung

- 1 Bevor die Kunststoffabdeckungen entfernt werden, müssen die Hydrokolloid-Klebe pads **aktiviert werden**, indem man sie:
 - Für mindestens 60 Sekunden in der Hand hält,
 - 10 – 15 Sekunden in der Nähe einer Wärmelampe erwärmt oder
 - 10 – 15 Sekunden an einen chemischen Fersenwärmer hält.
- 2 Ziehen Sie die Kunststoffabdeckungen ab und entsorgen Sie sie. Bringen Sie die Hydrokolloid-Pads **vor dem Ohr auf dem Knochen** an und halten Sie sie für 60 Sekunden fest, um eine gute Haftung zu gewährleisten.


Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich der ET-Tubus unterhalb der Plattform befindet, um Druck auf Gaumen oder Zahnfleisch zu vermeiden.

- 3 Wickeln Sie ein ca. 12 mm breites Klebeband **zuerst komplett um die Plattform der NeoBar®** und führen Sie dann das Band weiter um Plattform **und ET-Tubus**.

Entfernung

- 1 Ersetzen Sie die NeoBar® **alle 5 Tage** oder gemäß den Vorgaben des Krankenhauses – je nachdem, was früher eintritt.
- 2 Entfernen Sie das Klebeband, um den ET-Tubus von der NeoBar®-Plattform zu lösen.
- 3 Befeuchten Sie die Klebe pads gründlich mit Wasser oder Kochsalzlösung.
- 4 Ziehen Sie die Hydrokolloid-Klebe pads **langsam von der Haut ab**, während Sie die Stelle mit Wasser oder Kochsalzlösung betupfen.

Vorbereitung

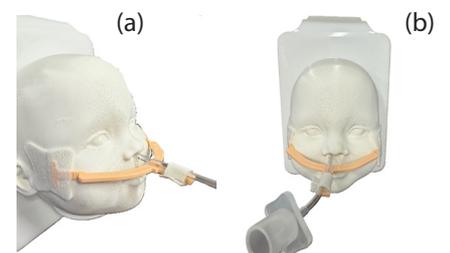

Anwendung



Entfernung

