

# Patientenwärme- system HotDog®

**KREIENBAUM**  
NEOSCIENCE

Das Patientenwärmesystem HotDog® von Augustine Surgical wurde entwickelt, um die Körpertemperatur Ihrer Patienten sicher und effektiv zu regulieren und somit einer perioperativen Hypothermie entgegen zu wirken.

Das System, bestehend aus einem Controller, sowie Matratzen und Decken verschiedener Größen und Formen, ist flexibel einsetzbar und für alle Operationsarten geeignet.



Bedienungsanleitung, Videos und mehr!

# Patientenwärmesystem HotDog®

## Schnell

Erreicht die gewünschte Temperatur innerhalb von 1 – 2 Minuten

## Gleichmäßig

Konduktives Erwärmen, keine Hot Spots

## Hygienisch

Wiederverwendbar per Wischdesinfektion\*, versiegelte Ecken, keine Gefahr von Kontaminationen wie bei üblichen Heißluft-Wärmesystemen

## Präzise

Genauere Temperaturkontrolle durch das Steuergerät

## Flexibel

Faltbare Decken, lange Kabel und eine intuitive Bedienung ermöglichen einen variablen Einsatz



## Automode

Automatische Steuerung und Anpassung der Temperatur

## Röntgendurchlässig

Bis auf den Rand, Sensor und Kabel

## Ökonomisch

Kein Verbrauchsmaterial, energieeffizient, 24 Monate einsetzbar

## Leise

Keine zusätzliche, störende Geräuschquelle im OP

\* Bei durchschnittlicher bis häufiger Verwendung können Wärmematratten 24 Monate lang wiederverwendet werden. Dies resultiert aus einer Abnahme der Leitfähigkeit und somit einer Erhöhung der Aufwärmzeit. Längere Verwendung ist unter Beachtung der Aufwärmzeit möglich.

## HotDog® Temperaturmanagement-Controller

Art.-Nr.: WC77




- Ermöglicht das Anschließen einer Wärmematrätze, vier Wärmedecken, einer Temperatursonde (wie unsere Universaltemperatursonde) und eines externen Monitors
- Automatische Steuerung und Anpassung der Temperatur durch AutoMode
- 7-Zoll Touch-Screen Display mit graphischer Anzeige der Patiententemperatur
- Integrierte Bedienungsanleitungen, Anwendungsbeispiele und hilfreiche Tipps
- Größe: 28,0 cm x 22,2 cm x 17,8 cm (H x B x T)
- Gewicht: 3,2 kg




Wählbare Temperaturen:  
Decken: 37 - 43 °C  
Matratten: 35 - 40 °C

# Wärmedecken

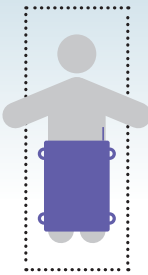


## Wärmedecke für den Unterkörper

Art.-Nr.: B103  
74,9 cm B x 98,4 cm L,  
1,36 kg

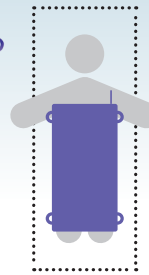


## Ganzkörper Wärmedecke

Art.-Nr.: B104  
74,3 cm B x 128,6 cm L,  
1,81 kg

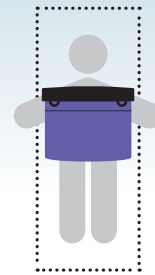


## Universaldecke

Art.-Nr.: B500  
Größe: 43,2 cm B x 76,2 cm L,  
0,8 kg

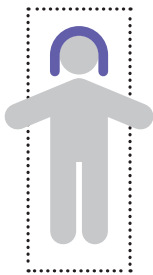


## Wärmedecke für den Kopf

Art.-Nr.: B107  
19,7 cm B x 70,5 cm L,  
0,54 kg

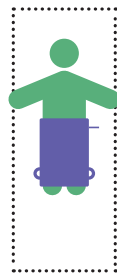

## Pädiatrische Wärmedecke für den Unterkörper

Art.-Nr.: B203  
45,72 cm B x 55,88 cm L, 0,45 kg


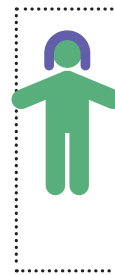


## Pädiatrische Wärmedecke für den Kopf, Small und Large

Art.-Nr.: B270, B271  
11,43 cm B x 33,02 cm L, 0,09 kg  
13,34 cm B x 38,74 cm L, 0,18 kg

## Vier Punkte für effektives Wärmen mit dem Patientenwärmesystem HotDog®:

1. Maximale Kontaktfläche – je größer die Kontaktfläche zwischen Patient und Wärmemittel, desto effektiver die Wärmeübertragung
2. Frühzeitiges Beginnen – Aktive Wärmezufuhr zum frühestmöglichen Zeitpunkt
3. Sensorkontakt – Sicherstellen des Kontaktes zwischen Patient und Sensor
4. Dünne Barriere – Die Schicht zwischen Patient und Wärmemittel möglichst gering halten, z.B. ein ungefaltetes Tuch

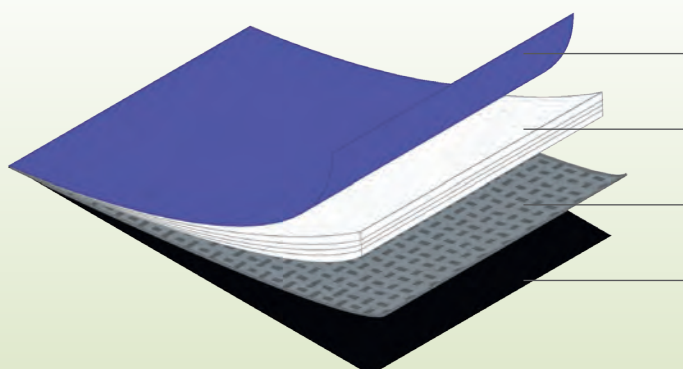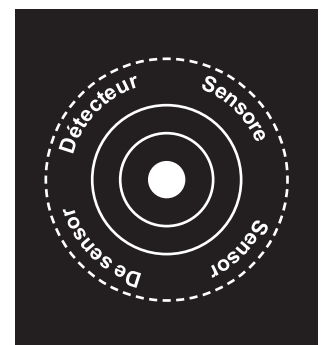

Polyurethanhülle, imprägniert mit antimikrobiellem Wirkstoff

Isolierende Schicht

Halbleitendes Polymergewebe

Polyurethanhülle – Patientenseite

## Wärmematratzen



### Wärmematratze S

Art.-Nr.: U101

49,53 cm B x 81,28 cm L, 0,9 kg



### Wärmematratze L

Art.-Nr.: U102

49,53 cm B x 127,00 cm L, 1,5 kg



### Wärmematratze Pädiatrie

Art.-Nr.: U220

44,45 cm B x 73,66 cm L, 1,0 kg



### Wärmematratze Trendelenburg

Art.-Nr.: U300

58,42 cm B x 99,7 cm L, 1,04 kg

## WaffleGrip

### Positionierungssystem und Wärmematratze für die Trendelenburg Position

Das WaffleGrip Trendelenburg Kit ermöglicht die einzigartige Kombination eines Positionierungssystems bei gleichzeitiger Wärmezufuhr während der Trendelenburg-Positionierung. Mittels hoher Reibung werden lokale Druckpunkte und Scherkräfte eliminiert – auch bei hohem BMI.



### WaffleGrip Trendelenburg Kit

(Art.-Nr.: A300, VE à 10 Stk.)

44,45 cm B x 73,66 cm L,  
1,0 kg

WaffleGrip Antirutsch-Matte, Vlies-Unterlage für die Armsicherung und Umpositionierung, Sicherheitsband sowie zwei Einwegsclips