



Nipplie Trinksauger

Für ein natürlicheres Füttern



LIFE STARTS WITH US

Ein Moment der Zuneigung, Geborgenheit und Verbundenheit, der sich 6 bis 8 Mal pro Tag wiederholt, ist die Mahlzeit, welche für eine ideale Entwicklung der kleinen empfindsamen Patienten, die unsere Neugeborenen sind, extrem wichtig ist.

Auch wenn das Stillen an der Brust nicht möglich ist, setzen die Eltern und das Pflegepersonal alles daran, diese besonderen Momente zu wahren, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Milch auf hygienische und sichere Weise verabreicht wird.



Fördern Sie die Einführung in den Mund und die natürliche Bewegung der Zunge bei einer Fütterung mit der Babyflasche und dem **Nipplie Beldico Trinksauger**

Bei den Trinksaugern zum einmaligen Gebrauch von Beldico handelt es sich um Medizinprodukte, die zur oralen Verabreichung von Muttermilch, rekonstituierter Milch oder anderen flüssigen Nahrungsmitteln mit oder ohne Zusatz von Medikamenten oder Nährstoffen für eine angepasste Ernährung von Frühgeborenen oder schwachen Säuglingen im Krankenhaus vorgesehen sind.

Die Trinksauger zum einmaligen Gebrauch von Beldico werden im Reinraum hergestellt, dann durch ETO sterilisiert oder mit Gamma-Strahlung behandelt. Sie beschränken das Risiko der Entwicklung von äußeren Keimen und erhalten das Gleichgewicht der Muttermilch.

Beldico hat den Nipplie Trinksauger, welcher der Form der Brust sehr nahe kommt, für eine leichtere Fütterung und einen sanfteren Übergang zwischen dem Stillen und der Babyflasche entwickelt. Er ist auf die Bedürfnisse der Bereiche **Neonatologie, Entbindungsstation** und **Pädiatrie** zugeschnitten.

Angepasst an die Anwendung im Krankenhaus

- **PRAKTISCH** : Die bereits sterilisierten oder bakteriologisch sauberen Nipplie Trinksauger mit Universal-Schraubgewinde sind sofort einsatzbereit (ready to use)!"
- **HYGIENISCH** : Die Schutzkappen gewährleisten einen physischen und aseptischen Schutz des Trinksaugers bis zur Verabreichung an das Kind.
- **AUSLAUFSICHER** : Der anschmiegsame und vom Ring unabhängige Trinksauger gewährleistet, dank seinem breiten Rand unter dem Ring, eine dichte Befestigung auf der Babyflasche.



Zwei, an der Farbe ihres Ringes, erkennbare Versionen

Entwickelt für ein natürlicheres Füttern

Die Form und das Material des **Nipple** Trinksaugers wurden sorgfältig und mit fachärztlicher Unterstützung des Forschungs- und Entwicklungsteams von Beldico ausgewählt. Damit ist der **Nipple** Trinksauger perfekt an die Physiologie des Stillens angepasst.


● Eine gute Balance zwischen weich und hart

Der Nipple Trinksauger ist **schmiegsam und passt sich dem Mund** während des Stillens an: Er positioniert sich ideal in der Mundhöhle, begünstigt die peristaltische Bewegung der Zunge und den Weitertransport der Milch zur Speiseröhre.

Die Härte des Nipple Trinksaugers sorgt für ein angenehmes und unterbrechungsfreies Füttern.

● Ein einzigartiges Design

Der Nipple Trinksauger kombiniert eine **breite Auflage** und eine **anatomische Form**, um dem Kind zu helfen, die natürliche Saugbewegung während des Stillens nachzuahmen, wodurch das Risiko einer Verwechslung von Brust und Trinksauger gemindert wird.

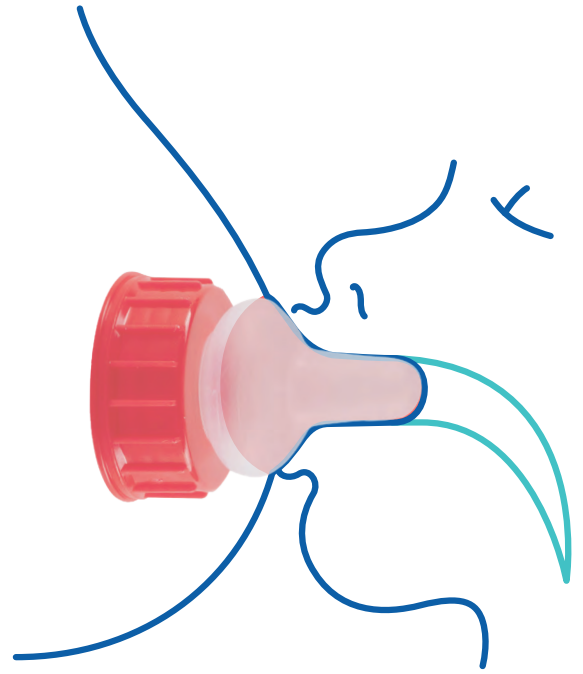

Sicherer Durchfluss beim Füttern
durch verstärkte und reißfeste Mikrobohrungen

Sanftes, nicht klebendes
Material, **geschmack- & geruchlos**, brustähnliches Gefühl

Anschmiegsamer Trinksauger mit rundem Ende, der **sich an fast jeden Babymund anpasst**, auch bei Babys mit Problemen beim Stillen

3 anpassbare Durchflusstufen, damit, je nach Anforderung, die richtige Milchmenge durchfließt

Breite Auflage, welche die Brust imitiert, und **dem Baby hilft, den Mund zu öffnen***

Beim Sauger 3V

- Langsamer Durchfluss
- Mittlerer Durchfluss
- Schneller Durchfluss




0% BPA, BPS, Phtalates, Latex

*Im Vergleich zu einem herkömmlichen Trinksauger mit schmaler Auflage

Standardeigenschaften

Benennung	Nippie Trinksauger zum einmaligen Gebrauch
Materialien	Sauger : Thermoplastische Elastomere (TPE) Ring : Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Saugerkappe : Polypropylen (PP) Garantiert latexfrei, Phthalat frei, BPA-frei, BPS-frei Recyclingfähige Materialien, müssen nach den geltenden Verfahren für die Entsorgung von Krankenhausabfällen entsorgt werden
Behandlungsart	Sterilisierung NAS 10 ⁻⁶ durch ETO oder Desinfektion NAS 10 ⁻² durch Gamma-Bestrahlung
Richtlinie 93/42/EWG	Medizinprodukt IIa

Die Nippie Trinksauger 1V und 3V eignen sich für alle anwendungsbereiten Babyflaschen von Beldico mit Universalgewindesteigung zum einmaligen Gebrauch.

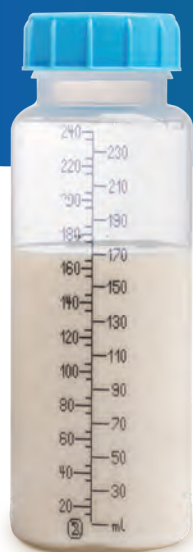

240mL



130mL



50mL



40 ml für Kolostrum

Die Kolostrum-Säuglingsflasche hat einen abgerundeten Boden, damit Pflegekräfte jeden Tropfen der wertvollen Erstmilch auffangen können.

Beldico entwickelt, fertigt und vermarktet Medizinprodukte für die Ernährung von Babys und fokussiert sich dabei besonders auf die spezifischen Bedürfnisse von Früh- und Neugeborenen.

**Flaschen - Abpumpsets - Trinksauger - Schnuller
Abpumpen und Umgang mit Muttermilch
Erwärmen von Muttermilch oder Milchnahrung**

Hersteller

BELDICO
Rue André Feher 3
BE-6900 Marche-en-Famenne
BELGIEN
Tel.: 0032 (0)84 31 37 80
www.beldico.be

Vertrieb

INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S.A.
Chaussée de Wavre 1110/7
BE-1160 Auderghem Brüssel
BELGIEN
Tel.: 0032 (0) 2 660 50 75
www.intermed.be

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

Kreienbaum Neoscience GmbH
Robert-Koch-Straße 9
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 39927-0
E-Mail: info@kreienbaum-neo.de
www.kreienbaum-neo.de