

# Yankauer Caretip™

**KREIENBAUM**  
NEOSCIENCE

Für universelles und  
chirurgisches Absaugen


- **Einzel, steril und doppelt verpackt in Peel-Beuteln**
- **Flache oder birnenförmige Spitze**
- **Mit oder ohne Vakuumöffnung für Absaugkontrolle**
- **Flexible Variante kann für optimale Absaugung und Komfort vom Anwender geformt werden**
- **Bruchsicherer, transparenter Polyvinylchlorid (PVC) Aufbau**
- **Abgerundete, atraumatische distale Spitze**
- **Optimale Öffnungen am Distalende für kontrollierte Absaugung**
- **Latex und DEHP frei**



Artikelnummer	Spitze	Vakuumkontrolle	Ausführung	Größe	Absaugkapazität	Öffnungen	Länge (mm)	VE	Abb.
CTY516MF	Mini	Nein	Flexibel	5 mm / 16 Fr	Gering	Nein	185	50	[1]
CTY516MFV	Mini	Ja	Flexibel	5 mm / 16 Fr	Gering	Nein	185	50	[1]
CTY516MR	Mini	Nein	Starr	5 mm / 16 Fr	Gering	Nein	185	50	[2]
CTY516MRV	Mini	Ja	Starr	5 mm / 16 Fr	Gering	Nein	185	50	[2]
CTY618RF	Normal	Nein	Flexibel	6 mm / 18 Fr	Normal	Ja	250	50	[4]
CTY618RFV	Normal	Ja	Flexibel	6 mm / 18 Fr	Normal	Ja	250	50	[3]
CTY618RR	Normal	Nein	Starr	6 mm / 18 Fr	Normal	Ja	250	50	[4]
CTY618RRV	Normal	Ja	Starr	6 mm / 18 Fr	Normal	Ja	250	50	[3]
CTY822HF	Breit	Nein	Flexibel	8 mm / 22 Fr	Hoch	Ja	285	50	[5]
CTY822HR	Breit	Nein	Starr	8 mm / 22 Fr	Hoch	Ja	285	50	[5]
CTY822BR	Bulp	Nein	Starr	8 mm / 24 Fr	Hoch	Ja	260	50	[6]
CTY822BRV	Bulp	Ja	Starr	8 mm / 24 Fr	Hoch	Ja	260	50	[6]

# Absaugkatheter TenderTip

Innovativer Absaugkatheter für hohe Patientensicherheit

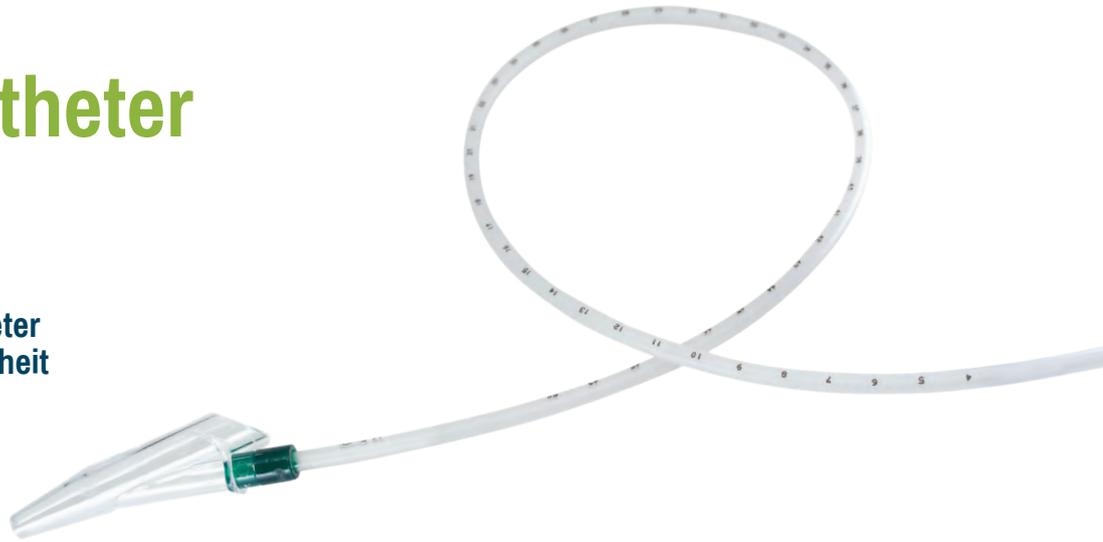

Der integrierte Fingertip ermöglicht eine effektive Eliminierung des Vakuums und vermindert so das Risiko einer Hypoxie. Durch das transparente Design ist das Sekret jederzeit sichtbar.



Die Atraumatische Mülly Spitze („Goldstandard“) hat zwei kleine, laterale Seitenaugen. Diese stabilisieren den Katheter im unteren Bereich und verhindern ein Abknicken der Spitze, was zu scharfen Kanten und somit Verletzungen der Schleimhaut führen kann. Die große, zentrale Öffnung wirkt dem Ansaugen der Schleimhaut entgegen und verringert somit auch die Gefahr von Verletzungen dieser.




Eine genaue Graduierung ab 4 cm lässt eine gute Kontrolle der Applikationstiefe zu. Hierdurch wird ebenfalls das Risiko einer Schleimhautverletzung reduziert.

Artikelnummer	Größe	VE
TT01-05-035	5 Fr / 35 cm	100
TT01-05-050	5 Fr / 50 cm	100
TT01-06-035	6 Fr / 35 cm	100
TT01-06-050	6 Fr / 50 cm	100
TT01-07-035	7 Fr / 35 cm	100
TT01-07-050	7 Fr / 50 cm	100
TT01-08-035	8 Fr / 35 cm	100
TT01-08-050	8 Fr / 50 cm	100
TT01-10-035	10 Fr / 35 cm	100
TT01-10-050	10 Fr / 50 cm	100
TT01-10-060	10 Fr / 60 cm	100
TT01-12-050	12 Fr / 50 cm	100
TT01-12-060	12 Fr / 60 cm	100
TT01-14-060	14 Fr / 60 cm	100
TT01-16-060	16 Fr / 60 cm	100

Steril und einzeln verpackt

# Absaugkatheter Mini Cath Delicate (15 cm)

Feiner Katheter für eine sichere oropharyngeale Absaugung

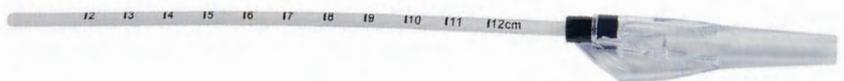

- Graduierung von 2 - 12 cm
- Weich und flexibel
- Atraumatische Spitze
- Integrierter Fingertip

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	VE
DC01.06.015	Mini Cath Delicate Absaugkatheter	6 Fr / 15 cm	100
DC01.07.015	Mini Cath Delicate Absaugkatheter	7 Fr / 15 cm	100
DC01.08.015	Mini Cath Delicate Absaugkatheter	8 Fr / 15 cm	100
DC01.10.015	Mini Cath Delicate Absaugkatheter	10 Fr / 15 cm	100
DC01.12.015	Mini Cath Delicate Absaugkatheter	12 Fr / 15 cm	100