



VIGGO Pflaster Little Owl

KREIENBAUM
NEOSCIENCE

VIGGO-Pflaster Little Owl

Transparentverband mit Pflasterstreifen zur Fixierung von Zugängen bei Neonaten und Kleinkindern

Die VIGGO-/Kanülenfixierpflaster Little Owl sind speziell für die Neonatologie und Pädiatrie entwickelt worden. Durch ihre minimalistische Größe überzeugen sie direkt bei der ersten Anwendung und sind besonders hautverträglich.

Anwenderfreundlich

- Einfache und leichte Applikation
- Kein typisches Verdrehen und Verkleben des Pflasters
- Zwei zusätzliche, sterile Pflasterstreifen sind direkt integriert

Groß dimensionierte Pflasterstreifen

- Zur Befestigung/Abpolsterung des Zugangs bzw. deren Flügel
- Zur Befestigung der „Sicherungsschleufe“

Wasserfeste Beschichtung

- Über die gesamte Verbandsoberfläche
- Dennoch luftdurchlässig

Verstärkte Bereiche

- Stabilität der Kanüle wird verbessert
- Gefahr des „Viggo-Ziehens“ wird minimiert

Spezieller Rahmen

- Erleichtert das Aufkleben
- Verhindert das typische Zusammenkleben oder Verdehnen des Pflasters bei der Aufbringung

Transparenter Bereich


- Ermöglicht ständige Beobachtung der Punktionsstelle

U-förmiger Einschnitt

- Ermöglicht Überkreuzen der Flügel für noch besseren Halt

Patientenfreundlich

- Latexfrei und hypoallergen
- Kann problemlos mehrere Tage auf der Haut haften
- Leicht und schmerzfrei abzulösen

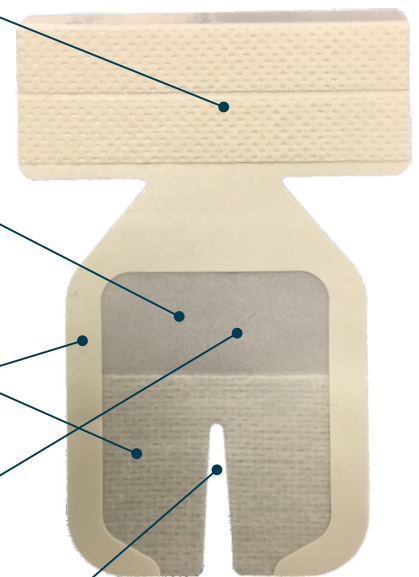

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Verpackungseinheit
812016	VIGGO Pflaster (small)	3,5 x 4,7 cm	50 Stück
812001	VIGGO Pflaster (medium)	5,0 x 6,0 cm	50 Stück
			steril und einzeln verpackt