


Blasenkatheter

für die Anwendung bei Früh-
und Neugeborenen und Kindern

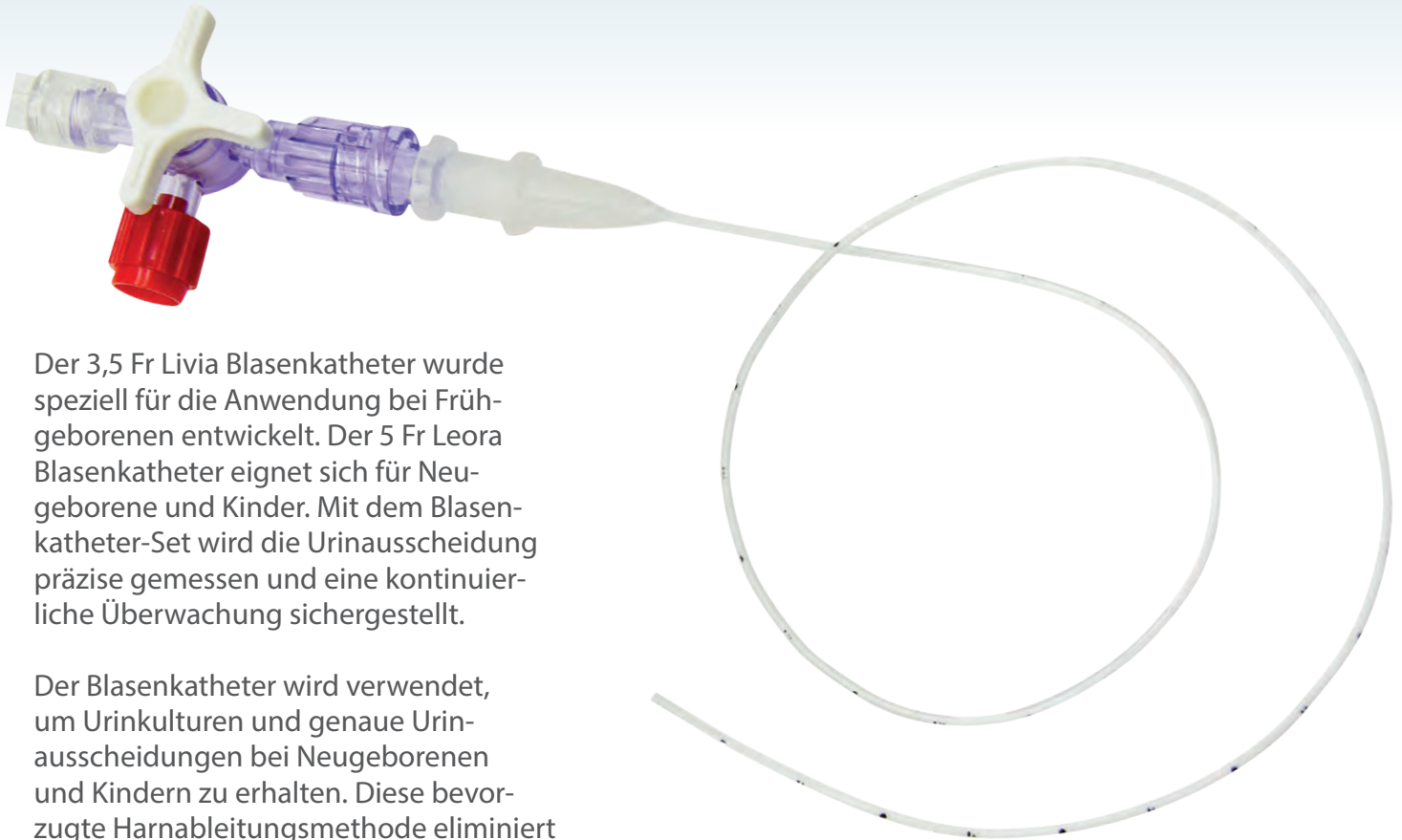

Der 3,5 Fr Livia Blasenkatheter wurde speziell für die Anwendung bei Frühgeborenen entwickelt. Der 5 Fr Leora Blasenkatheter eignet sich für Neugeborene und Kinder. Mit dem Blasenkatheter-Set wird die Urinausscheidung präzise gemessen und eine kontinuierliche Überwachung sichergestellt.

Der Blasenkatheter wird verwendet, um Urinkulturen und genaue Urinausscheidungen bei Neugeborenen und Kindern zu erhalten. Diese bevorzugte Harnableitungsmethode eliminiert die Unannehmlichkeiten und Messfehler, die mit dem Wiegen von Windeln verbunden sind. Der Blasenkatheter ist ein geschlossenes Harnableitungssystem mit Silikonelastomer-Harnröhrenkatheter, der zur präzisen Urinausscheidung bei Neugeborenen und Kindern verwendet wird.




Merkmale:

Der Silikonkatheter hat eine weiche, abgerundete Spitze und eine nicht benetzbare Oberfläche, um Traumata beim Einführen zu reduzieren.

Das biokompatible, nicht reaktive Silikon minimiert Harnröhrenreizungen und Krustenbildung.

Art.Nr.	Katheter Ø	Beschreibung	Stk./Pkg.
LK35Fr250	Livia 3,5 Fr 1,2 mm	Einwegprodukt, steril	10
LK50Fr250	Leora 5 Fr 1,7 mm	Einwegprodukt, steril	10

Blasenkatheter-Set

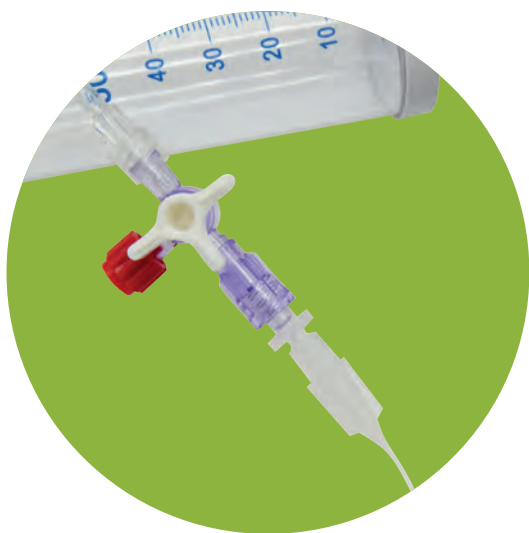

Das Blasenkatheterset ist ein geschlossenes Harndrainagesystem, mit dem bei Neugeborenen und Kindern genaue Urinausscheidungen gemessen werden können.

Das Blasenkatheter-Set besteht aus einem Dreiwegehahn für Probenahmezwecke und einer 100-ml-Bürette zur genauen Messung der Urinausscheidung.

Der Dreiwegehahn mit Injektionsstelle ermöglicht sowohl eine kontaminationsfreie Probenahme im mittleren Strahl wie auch das Spülen des Katheters. Durch die Verwendung der 100-ml-Sammelbürette kann die Urinausscheidung präzise gemessen werden. Das biokompatible und nicht reaktive Silikon minimiert Harnröhrenreizungen und Krustenbildung.

Das Set besteht aus:

- Dreiwegehahn mit latexfreier Injektionsstelle
- 100-ml-Sammelbürette mit Ablasshahn
- 100-ml-Harnauffangbeutel

Art.Nr.	Beschreibung	Stk./Pkg.
HK35Fr250-Set	Einwegprodukt, steril	10

Die Urinbeutel sind auch separat erhältlich:

Art.Nr.	Beschreibung	Stk./Pkg.
EN0100	Urinbeutel 100 ml	25